

**nosiboo<sup>\*</sup>eco**  
manual nasal aspirator

# Bedienungsanleitung

Nosiboo ECO manueller Nasensauger

GER



E-Mail: [customerservice@nosiboo.com](mailto:customerservice@nosiboo.com)

Internet: [www.nosiboo.eu](http://www.nosiboo.eu)

Tel: +36 72 551 642




**Hergestellt von: ATTRAKT KFT.**

H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 Ungarn

Made in EU



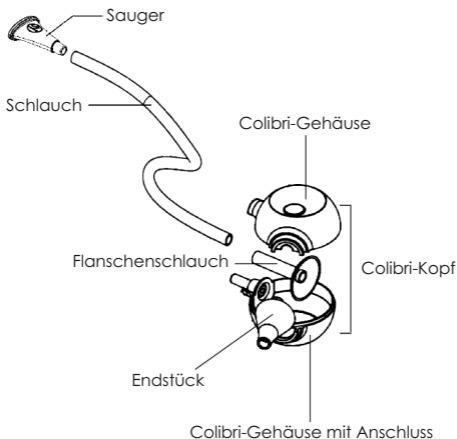

### **Sicherheitshinweise**

Wenn die folgenden möglichen Gefahrensituationen nicht vermieden werden, können Verletzungen des Benutzers oder sogar tödliche Unfälle auftreten.

**Warnung** – Das Gerät kann ausschließlich zur Entfernung des Nasenschleims aus der Nase eines Kindes verwendet werden. Desinfizieren Sie den Colibri-Kopf nach jedem Gebrauch. Lassen Sie die demontierten Teile des Nosiboo ECO nicht in Reichweite von Kindern liegen, da sie diese verschlucken könnten. Das Gerät darf nur von Erwachsenen benutzt werden. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Kindern oder Personen mit eingeschränkter körperlicher oder geistiger Leistungsfähigkeit.

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile ordnungsgemäß befestigt sind, bevor Sie das Gerät benutzen. Wenn nach der Benutzung des Geräts Ausschläge oder Rötungen an der Nase des Kindes auftreten, dürfen Sie das Gerät nicht wieder verwenden! Suchen Sie einen Arzt auf! Verwenden Sie das Gerät nicht bei Hämophilie, wenn sich die Blutgefäße der Nasenschleimhaut erweitern – bei häufigem Nasenbluten, während der Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten, bei angeborenen Fehlbildungen (z.B. Gaumenspalte).

## **1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Vorbeugung der durch Erkältungen im Kindesalter verursachten Beschwerden und Beschleunigung des Heilungsprozesses durch Entfernung des Nasenschleims. Empfohlen für Kinder (in der Regel unter 4 Jahren), die den Nasenschleim nicht selbst durch Naseputzen entfernen können. Das für die Absaugung erforderliche Vakuum wird durch den Mund des Benutzers erzeugt (dank des abgetrennten Aufbaus erfolgt dies indirekt).

Säuglinge sollten liegen und Kleinkinder sollten in einer stabilen Position sitzen, während Sie ihre Nase absaugen. Stecken Sie den Sauger in Ihren Mund und führen Sie das zuvor desinfizierte Endstück in die Nasenhöhle ein, so dass es leicht nach außen zum Auge zeigt. In dieser Position können Sie das Endstück leicht bewegen und gleichzeitig diskontinuierlich mit dem Mund durch den Schlauch saugen. Der Anschlusspunkt des Schlauchs sollte während des Gebrauchs nach unten zeigen. Trockener oder sehr dicker Nasenschleim kann durch Salzlösungen gelöst werden. Nicht mehr als 5 ml davon sollten auf einmal verwendet werden.

Nach der Anwendung der Lösung einige Minuten warten, erst danach den Nasensauger verwenden. Der Nosiboo ECO kann bis zu 5 ml dünne Flüssigkeit aufnehmen. Die abgesaugte Flüssigkeit sammelt sich an der Innenwand der Düse und kann dank ihres aufwendigen Designs nicht aus dem Inneren des Colibri-Kopfes austreten, so dass das Gerät ohne Filterteile sicher verwendet werden kann.

## **2. Einführung und Inbetriebnahme**

1. Reinigen Sie die Teile des Colibri-Kopfes (siehe Kapitel Reinigung und Lagerung)
2. Stecken Sie den Flanschschlauch in die Colibri-Gehäusehälfte, die einen Anschluss hat
3. Bringen Sie die Colibri-Gehäusehälfte, die keinen Anschluss hat, in die richtige Position
4. Drücken Sie das flexible Endstück auf den passenden Flansch
5. Befestigen Sie ein Ende des Schlauches am Colibri-Kopfanschluss
6. Befestigen Sie das andere Schlauchende am Sauger

Das Gerät kann mehrmals täglich verwendet werden; das allgemeine Ziel ist es, die ruhige Atmung des Kindes zu erleichtern. Empfohlene Anwendungshäufigkeit: bei Bedarf mehrmals täglich, nach dem Aufwachen, vor dem Essen und Schlafen.

**3. Reinigung und Lagerung** – Der Colibri-Kopf kann nach dem Trennen von Schlauch und Endstück auseinandergenommen werden. Um den Nasensauger zu reinigen, trennen Sie ihn vom Schlauch. Danach die Teile in lauwarmem Wasser waschen, in Desinfektionsflüssigkeit desinfizieren und trocknen lassen. Empfohlenes Desinfektionsmittel: Chicco Desinfektionsmittel. Das Gerät sollte in einem geschlossenen Raum ohne direkte Sonneneinstrahlung oder Strahlungsheizungen gelagert werden.

**4. Umwelt** – Der manuelle Nasensauger Nosiboo ECO stellt keine Umweltrisiken dar und kann im Hausmüll entsorgt werden.

## **5. Technische Daten**

Gewicht (mit Verpackung): 105 g

Abmessungen (verpackte B x H x T): 200 x 200 x 50 mm

Geplante Lebensdauer: 3 Monate